

毛穴形状解析ソフトウェア




PRIMOS




PRIMOS の画像から毛穴形状を解析するソフトができました

PRIMOS で撮影した画像を利用して毛穴の形状解析ができるようになりました。

専用ソフトから PRIMOS で保存した画像を選び、そのまま毛穴の形状解析にかけられます。

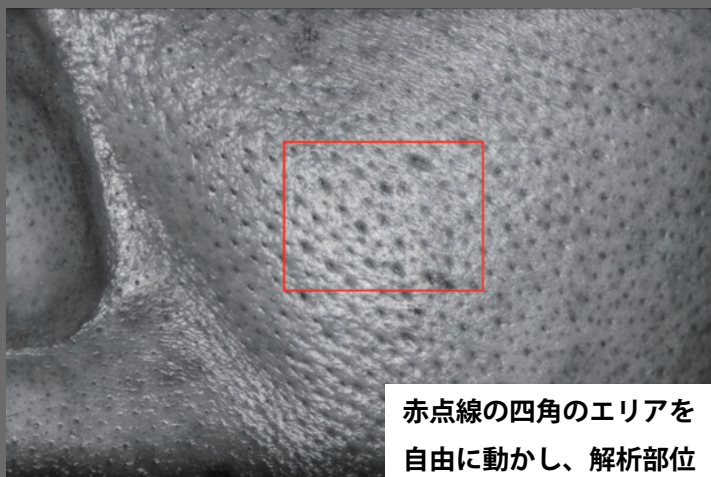

⇒
解析

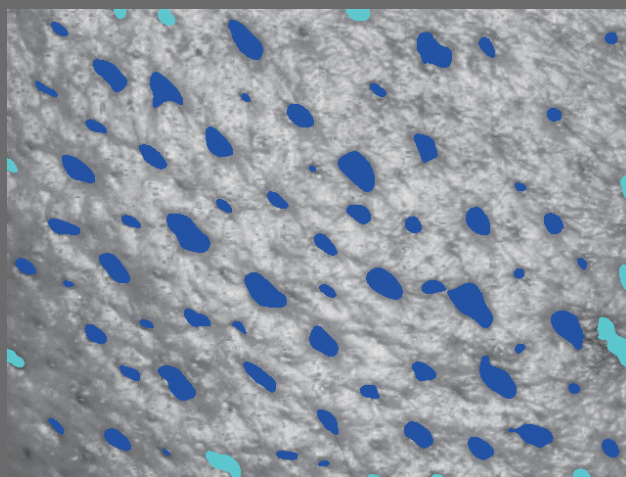

PRIMOS の画像から抽出

赤点線の四角のエリアを自由に動かし、解析部位を選択、保存。解析

⇓ 結果

	A	B	θ	A+B	毛穴たるみ率	認識面積	認識体積
	[u]	[u]	[Deg]	[u]	差/長径x100	[mm ²]	[mm ³]
1	1000	422	130	1422	57.8	0.3272	0.0118
2	421	198	142	619	53	0.0652	0.0011
3	897	521	139	1418	41.9	0.3504	0.0113

通常の毛穴形状解析ソフトウェアと同じく毛穴一つ一つの「面積」「長径」「短径」を表示し「毛穴たるみ率」を算出。「方向（角度）」「認識面積」を瞬時にグラフにプロット、一目で毛穴の形状の状態把握もできます。



対象：PRIMOS にて撮影した画像のみ
(他機器で撮影した画像は使用できません)

【お問合せ】

株式会社インテグラル

〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-25-2

TEL:03-6417-0810 FAX:03-6417-0853

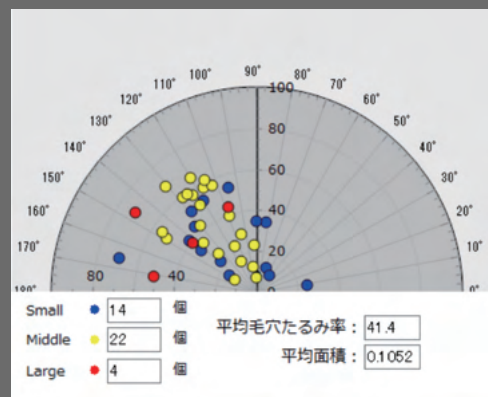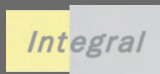

グラフにプロット